

# PŘÍDAVNÁ LED OSVĚTLENÍ ARSENAL

## DIFÚZNÍ OSVĚTLENÍ PRO STEREOMIKROSKOPY

NOVINKA



### DIFÚZNÍ OSVĚTLENÍ PRO STEREOMIKROSKOPY

zajišťuje dokonale rozptýlené, rovnoměrné osvětlení, které mimořádně zkvalitní Váš obraz zejména při fotografování. Difúzní osvětlení funguje na principu rovnoměrného rozptýlení LED světla v osvětlovacím klobouku a proto nevrhá stíny. Pozorovaný objekt je zobrazen bez nežádoucích stínů a krásně prostorově prokreslený. Díky LED diodám Vám osvětlení nezabarví předmět dožluta a zachová si tak přirozené barvy. Difúzní osvětlení snadno připojíte k většině stereomikroskopů Arsenal buď přímo, nebo pomocí vhodného adaptéru.



### TECHNICKÉ ÚDAJE:

#### VSTUPNÍ NAPĚTÍ

- 96 - 265 V AC

#### VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ

- 24 V

#### VÝKON

- 6W

#### ZDROJ OSVĚTLENÍ


- LED diody s plynulou regulací intenzity světla

#### KOMPATIBILNÍ S MODELY

- řada SZS 11, SZP 11, SZP 33, DSZS 10

#### HMOTNOST PŘÍSTROJE/HMOTNOST BALENÍ

- 1,05 / 1,25 kg

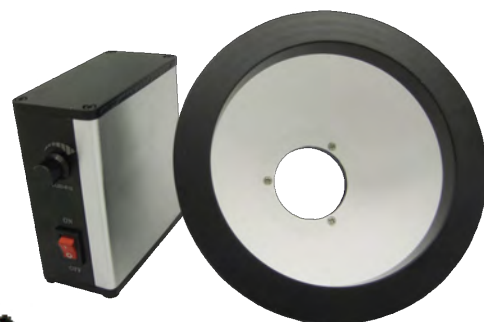

Difúzní světlo na stereomikroskopu  
SZP 3302-T ZOOM LED



ARSENAL s. r. o., Na Strži 59, 140 00 Praha 4, tel./fax: 261 222 561, tel.: 720 518 657  
e-mail: [mikroskopy@arsenal.cz](mailto:mikroskopy@arsenal.cz), [www.arsenal.cz](http://www.arsenal.cz), [www.mikroskopy-arsenal.cz](http://www.mikroskopy-arsenal.cz), [www.lupy.cz](http://www.lupy.cz),  
[www.digitalni-mikroskop.cz](http://www.digitalni-mikroskop.cz), [www.skolni-mikroskopy.cz](http://www.skolni-mikroskopy.cz), [www.prumyslovy-mikroskop.cz](http://www.prumyslovy-mikroskop.cz)

